

# 1 Указания по безопасности



## 1.1 Указания по безопасности

### Электропитание

- Прежде, чем подключить прибор к электрической сети, убедитесь в том, что напряжение сети соответствует значению, указанному на заводской табличке.
- Вставляйте вилку сетевого кабеля в розетку только в том случае, если прибор выключен.
- Не носите прибор за сетевой кабель и не тяните и не крутите его. Не пережимайте кабель.
- Расположите сетевой кабель таким образом, чтобы исключить опасность отрыва от него.
- Не беритесь за сетевую вилку, если Вы стоите в воде. Всегда беритесь за вилку только сухими руками.

### Для особых лиц

- Данный прибор не предназначен для использования лицами (в т. ч. детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта или знаний, за исключением случаев, когда они находятся под постоянным присмотром ответственных за них лиц или получили от них указания, по использованию прибором.
- За детьми необходимо постоянно следить, чтобы не допустить их игры с прибором.
- В случае аллергических заболеваний дыхательных путей перед использованием прибора проконсультируйтесь с врачом.
- Проконсультируйтесь с врачом, если использование может представлять опасность для здоровья. В этом случае незамедлительно прекратите использование прибора.

### Для использования прибора

- Прибор не предназначен для коммерческого использования.
- Используйте прибор только по его назначению, указанному в инструкции по применению. При использовании не по назначению теряет свою силу гарантия.
- Не используйте прибор, если прибор или сетевой кабель повреждены, если прибор не функционирует должным образом, если он упал или попал в воду.
- Не допускайте контакта прибора и сетевого кабеля с горячими поверхностями.
- При использовании устанавливайте прибор на ровную и прочную поверхность таким образом, чтобы он не мог упасть.
- Не поднимайтесь прибор, упавший в воду. Сразу же вытащите сетевую вилку.
- Не используйте прибор, если бак для воды пустой или в нем находится слишком мало воды.
- Не используйте эфирные масла (например, эвкалиптовое или мятыное) - они могут привести к повреждению прибора.
- Не допускайте отложения пыли и загрязнений в вентиляционных прорезях, расположенных на нижней части прибора.
- После использования выключите все функции и вытащите вилку из розетки.

### Ход и очистка

- Самы Вы можете выполнять только очистку прибора. В случае

неисправностей не ремонтируйте прибор самостоятельно, т. к. при этом теряет свою силу гарантия. Обращайтесь в торговую организацию и доверяйте проведение ремонта только сервисным центрам MEDISANA.

- Не погружайте прибор в воду или в другие жидкости.
- Если в прибор все же попала жидкость, незамедлительно вытащите вилку из розетки.
- Храните прибор в сухом месте.

## 2 Полезные сведения

### Благодарность

Благодарим Вас за доверие и поздравляем с покупкой! Купив увлажнитель воздуха UHW, Вы стали владельцем высококачественного продукта от MEDISANA. Для достижения желаемого результата и обеспечения длительного срока службы прибора MEDISANA UHW мы рекомендуем внимательно прочесть приведенные ниже указания по применению и уходу.

### 2.1 Комплектация и упаковка

Проверьте комплектность прибора и отсутствие повреждений. В случае сомнений не вводите прибор в работу и обратитесь в торговую организацию или в сервисный центр. В комплект входят:

- 1 MEDISANA интенсивный увлажнитель воздуха UHW
- 1 щетка
- 1 инструкция по применению

Упаковка может быть подвергнута вторичному использованию или переработке. Ненужные упаковочные материалы утилизировать надлежащим образом. Если при распаковке Вы обнаружили повреждение вследствие транспортировки, немедленно сообщите об этом продавцу.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!


Следите за тем, чтобы упаковочная пленка не попала в руки детям. Опасность удушения!

### 2.2 Ультразвуковая технология

Слишком сухой воздух в помещении увеличивает предрасположенность к инфекционным заболеваниям и заболеваниям дыхательных путей и приводит к усталости и ослаблению внимания. Полезный для здоровья воздух должен иметь относительную влажность от 40 до 55 %. Тихая и энергосберегающая ультразвуковая технология увлажнителя воздуха с помостью колебаний превращает воду в мелкодисперсный туман, повышающий уровень влажности воздуха. Это улучшает качество воздуха и предупреждает высыпание слизистых и кожи. Производительность прибора рассчитана на помещение площадью не более 30 м<sup>2</sup>. Регулятором интенсивности тумана ③ Вы настраиваете степень увлажнения соответственно размерам помещения. Строго соблюдайте указания по очистке и уходу.

## Применение

### MEDISANA

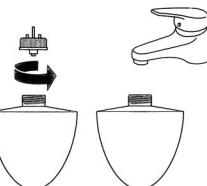

может подняться поверх распылительной мембранны. Это может нарушить работу распылителя. Распылительную насадку ② можно снять, после того как прибор будет отключен от сети, и находящаяся на ней вода может быть затем высушена сухой тряпкой. По окончании использования прибора вылейте оставшуюся воду и ополосните резервуар свежей питьевой водой. Перед эксплуатацией прибора в следующий раз вновь наполните резервуар свежей питьевой водой. Если прибор не используется продолжительное время, отключите его от сети, затем снимите резервуар для воды и опорожните его.

### 3.2 Добавление ароматических эссенций

Если Вы хотите использовать прибор с применением ароматических эссенций, то добавьте 5-10 капель эссенции в наполненный 500 мл воды резервуар. Помните о том, что добавление эссенции может повлечь за собой образование осадочных пятен возле прибора! Фирма MEDISANA предлагает ассортимент ароматических эссенций с различными оттенками запаха, которые Вы можете заказать дополнительно. Запрещается применять ароматические вещества, содержащие масло, т. к. это может привести к повреждению прибора.

### 3.3 Включение и выключение прибора

Установите насадку распылителя ② на прибор. Вставьте кабель блока питания в разъем ① для блока питания на приборе и подключите штекер блока питания в сеть. После короткого нажатия на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ ⑤ прибор начнет процесс распыления воды и заработает вентилятор. Одновременно на кнопке загорится синий индикатор рабочего состояния прибора. Повторное нажатие кнопки ВКЛ/ВЫКЛ ⑤ приведет к выключению прибора. Когда закончится жидкость в резервуаре для воды, прибор автоматически отключится и процесс распыления воды и вентиляции воздуха прекратится.

### Продолжительность работы прибора

Уровень распыления 1 при объеме наполненной воды в 500 мл: около 9 часов  
Уровень распыления 2 при объеме наполненной воды в 500 мл: около 6 часов

### 3.4 Регулировка режимов распыления

Освежитель воздуха Medibreeze Intensiv фирмы MEDISANA может использоваться в двух рабочих режимах. Чтобы переключить прибор с уровня 1 на уровень 2, нажмите один раз на кнопку уровня распыления 2 ③. Увеличение потока вентилируемого воздуха приведет к увеличению распыляемой влаги в воздушной среде помещения, одновременно загорится синий индикатор рабочего состояния.

### 3.5 Подсветка

Резервуар для воды освежителя воздуха Medibreeze Intensiv фирмы MEDISANA снабжен внутренней лампой подсветки, которая включается легким нажатием на кнопку подсветки ④. Повторным нажатием на данную кнопку подсветка будет выключена. Подсветка может использоваться независимо от работы распылителя и

## 4 Разное

### 4.1 Чистка и уход

ventingilatora. Когда прибор автоматически отключается, подсветка будет продолжать работать. Интенсивность освещения снижается, когда одновременно включена функция распыления.

### 4.2 Указание по утилизации



• Прежде чем начать чистку, убедитесь, что прибор выключен и отключен от сети.

• Вытреските прибор снаружи влажной, мягкой тряпкой.

• Не используйте для чистки едких или абразивных моющих средств, например, мюющих порошков и т.п. Они могут повредить поверхность корпуса.

• При частом использовании прибора мы рекомендуем тщательно чистить аппарат минимум один раз в неделю. Резервуар для воды и насадку распылителя можно мыть горячей водой (> 65 °C) или промывать их 75 %-ным раствором алкоголя. Распылительную камеру и резервуар для воды можно очистить смоченной в алкогольном растворе тряпкой или ватной палочкой. Следите за тем, чтобы во внутренности прибора не попала вода.

• Если Вы не используете аппарат продолжительное время, выпейте оставшуюся воду из резервуара и высушите прибор.

• Накипь можно удалить мягким средством для удаления накипи, например, лимонной кислотой. Растворите средство в воде согласно указаниям изготовителя, залейте смесь в бак для воды и прибор и оставьте смесь действовать на несколько часов. Затем промойте обе части свежей водой.



### ВНИМАНИЕ!

Внутри прибора ни в коем случае не попадать вода!

• Храните аппарат в сухом, прохладном месте.

### 4.3 Технические характеристики

Запрещается утилизировать данный прибор вместе с бытовыми отходами. Каждый потребитель обязан сдавать все электрические и электронные приборы независимо от того, содержит ли они вредные вещества, в городские приемные пункты или предприятия торговли, чтобы обеспечить их экологичную утилизацию. По вопросам утилизации обращайтесь в коммунальные предприятия или к дилеру.

### Название и модель

: MEDISANA Освежитель воздуха Intensiv Medibreeze

Блок питания : 100-240 В~ 50/60 Гц, 0,5 А

от батареек: 13,5 В~ 1 А

Габаритные размеры : общая длина 160 мм, ширина 110 мм, высота 200 мм

Вес вместе с блоком питания : около 1055 гр

Артикул : 60003

Номер EAN : 40 15588 60003 6



В ходе постоянного совершенствования прибора возможны технические и конструктивные изменения.