


прибор для ухода за кожей

VIBROION

серии m, модель m9060



GEZA *tone*

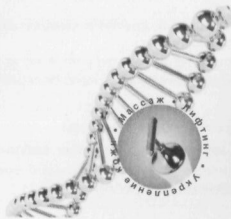

- Вибрация и лифтинг
- Укрепление кожи

Пробудите Вашу кожу,
используя возможности
аппарата –
6000 вибраций в минуту.

Ваша кожа в тонусе всего
за 3 минуты в день.

Инструкция по применению

ВВЕДЕНИЕ

Обменные процессы в молодой и здоровой коже лица, благодаря великолепному балансу отрицательных и положительных ионов, протекают абсолютно нормально. С возрастом, под воздействием окружающей среды и внутренних процессов, утрачивается баланс между отрицательными и положительными ионами в клетках. Количество клеток кожи, имеющих негативный потенциал, возрастает, что приводит к нарушениям циркуляции биотоков, микроциркуляция нарушается, продукты обмена веществ накапливаются в коже. В связи с этим клетки ослабевают, замедляются обменные процессы, снижается синтез биологически активных веществ, появляются морщины, кожа становится дряблой.

Этот аппарат специально создан для заботы о коже, чтобы улучшить процессы выведения токсинов и избыточной жидкости, оказывая наряду с этим эффект лифтинга. Аппарат активно выводит метаболиты и избыточную жидкость, устраняя отеки, повышает эластичность и упругость кожи, улучшает микроциркуляцию, восстанавливая цвет лица.

ЭФФЕКТЫ

1. Вибрация и лифтинг.

Используйте этот прибор, чтобы повысить тонус и упругость кожи. Используя T-образную насадку, вы можете укрепить мышцы лица, устранить темные круги под глазами, моделировать, и подтянуть овал лица, уменьшить «второй подбородок», устранить отечность.

2. Роль ионов в питании кожи.

Перемещение ионов под действием гальванического тока вызывает изменение их соотношения в клетках и межклеточном пространстве, что восстанавливает ионный баланс и нормализует обменные процессы.

Аппарат помогает водорастворимым питательным веществам более эффективно проникать в глубокие слои кожи, восстанавливая обменные процессы. Ионизация кожи способствует улучшению цвета лица, замедляет процессы старения, усиливает проникновение питательных веществ в глубокие слои кожи.

3. Воздействие «биотоками».

При работе прибора рекомендуется использовать специальную «заряженную» косметику. Биотоки позволяют мягко, деликатно и очень эффективно воздействовать на функциональную активность клеток кожи, мышц, лимфатических и кровеносных сосудов.

Под воздействием биотоков происходит восстановление «заряда» оболочки клетки и открываются ионные каналы. Улучшается снабжение клеток питательными веществами, ускоряется синтез белков и ДНК. Клетка «просыпается» и начинает нормально функционировать. Биотоки воздействуют не только на обменные процессы клеток кожи, но и на мышцы, кровеносные и лимфатические сосуды, обеспечивают великолепное увлажнение глубоких слоев кожи. Используя этот аппарат, Вы можете разгладить морщины, повысить тонус кожи и мышц, вернуть упругость и четкий овал лица, уменьшить расширенные поры и придать лицу свежий вид.

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Уменьшение морщин в области лба
- Уменьшение морщин в области глаз
- Выравнивание тона кожи
- Укрепление уголков губ
- Уменьшение «второго» подбородка
- Укрепление овала лица
- Уменьшение морщин в области шеи и декольте

ОПИСАНИЕ АППАРАТА



1. Сенсорные контакты
2. Кнопка вкл./выкл.
3. Т-образный электрод

ПРИМЕНЕНИЕ

1. После очищения кожи нанесите «отрицательно заряженную» сыворотку.
2. Включите аппарат, удерживая электропроводные металлические сенсорные контакты по бокам прибора, направьте его на лицо.
3. Используйте аппарат, согласно изображению на картинке, повторяя каждое движение по 3 раза.
4. Общее время воздействия 10 минут.

Внимание! При работе аппарата необходимо **ВСЕГДА** касаться рукой сенсорных контактов на корпусе прибора.

• Способ воздействия.

Удерживайте сенсорные контакты и медленно двигайте Т-образный наконечник от «центра к периферии» по лицу, и снизу вверх по направлению мышц и лимфотока. Повторяйте каждую манипуляцию 3 раза.

• Подтяжка лица.

Движение снизу вверх по направлению мышц и лимфотока. Повторяйте каждую манипуляцию 3 раза не менее 10 минут.



ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

- Эффект будет более заметен при использовании «заряженной» сыворотки. Не проводите процедуру по сухой коже!
- Пожалуйста, держите прибор вдали от источников воды или от мест с повышенной влажностью, таких как ванная, раковина или подобные им, так как это может привести к нарушению работы прибора и его поломке.
- Пожалуйста, держите прибор вдали от детей и животных.
- Если прибор долгое время не используется, необходимо извлечь из него батарейку.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

При наличии хронических заболеваний необходимо проконсультироваться с врачом перед использованием прибора.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Воздействие ионов улучшает обменные процессы в клетках кожи.
- Режим вибрации восстанавливает состояние кожи, улучшая ее упругость и стимулируя выведение токсинов и избыточной жидкости.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник питания: 1,5V, от батареи типа AA
Потребляемый ток: 0,35A
Мощность: 0,5W
Габариты: 174x66x40 мм, вес: 86 г