

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ


Ингаляции следует проводить, соблюдая ряд правил:

- Не нужно отвлекаться разговором или чтением.
- При заболеваниях носа и придаточных пазух носа следует вдыхать и выдыхать лекарственный препарат без напряжения через нос, при заболеваниях глотки, трахеи, бронхов, легких – через рот.
- Одежда не должна стеснять шею и затруднять дыхание.
- Ингаляции проводят не ранее, чем через 1–1,5 часа после еды.
- После ингаляции в течение часа не рекомендуется разговаривать, петь и принимать пищу.

В каждом конкретном случае необходимо учитывать индивидуальную переносимость того или иного лекарственного препарата.

Количество ингалируемого раствора, которое достигает бронхиального дерева и альвеол, зависит от размеров ингалируемых частиц. Оптимальными для попадания в дыхательные пути являются аэрозоли с диаметром частиц 2–5 мкм. Более мелкие частицы (менее 0,8 мкм) попадают в альвеолы, где быстро всасываются или выдыхаются, не задерживаясь в дыхательных путях и не обеспечивая терапевтического эффекта. Более крупные частицы (10 мкм и более) оседают в ротоглотке.

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ ЧЕЛОВЕКА

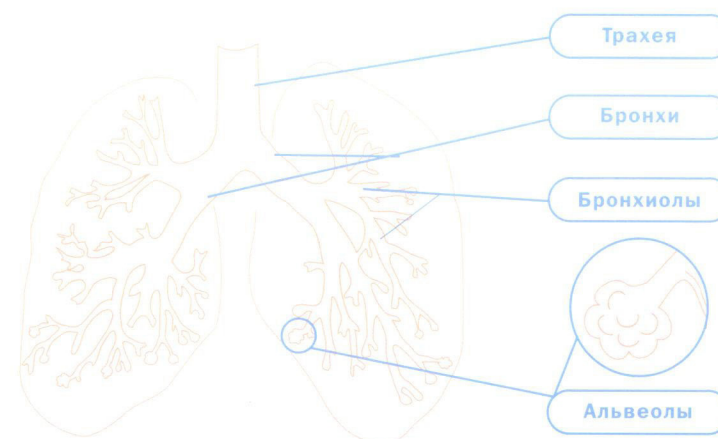

ХРАНЕНИЕ ПРИБОРА И УХОД ЗА НИМ

Очистка прибора

Перед использованием и после каждого применения прибор необходимо очистить. После использования очистка должна быть произведена немедленно, только после этого прибор можно убрать на хранение.

1. Разберите ингалятор

Перед первым использованием или после хранения снимите крышку емкости для лекарства и емкость для лекарства (см. раздел «Подготовка к использованию»).

После каждого применения снимите насадку для рта, соединительную камеру и емкость для лекарства.

2. Очистите емкость для лекарства от остатков лекарственного препарата

Очистка емкости производится распылением дистиллированной воды.

- Откройте крышку емкости для лекарства и вылейте остатки лекарственного препарата.
- Налейте небольшое количество дистиллированной воды в емкость и закройте крышку.
- Установите емкость для лекарства на прибор. Нажмите и удерживайте кнопку START/STOP в течение 1–2 минут (до полного использования дистиллированной воды), чтобы очистить сетку от остатков лекарственного препарата.

ВНИМАНИЕ

- Если во время ингаляции изменится звук, и дистиллированная вода закончится, немедленно отключите питание, отпустив кнопку START/STOP, чтобы избежать повреждения сетки емкости для лекарства.
- Очищайте прибор от остатков лекарственного препарата после каждого применения. В противном случае возможно засорение сетки емкости для лекарства.

3. Очистите детали прибора

Очистите емкость для лекарства, соединительную камеру, насадку для рта куском марли, смоченном в дистиллированной воде.

4. Тщательно просушите детали прибора

После очистки протрите детали прибора сухим куском марли и хорошо просушите.

ВНИМАНИЕ

- Следите за тем, чтобы частички ткани не оставались на сетке, это может привести к сбоям в работе прибора.
- Не прикасайтесь к сетке емкости для лекарства ватными палочками и другими посторонними предметами.

5. Очистите прибор

- Слегка смочите кусок марли водой и очистите прибор от загрязнений. Затем протрите насухо новым куском марли.
- Очистите электроды прибора и емкости для лекарства сухой тканью. Это обеспечит нормальную электропроводность, а значит и нормальную ингаляцию.

ВНИМАНИЕ

Не используйте для очистки прибора испаряющиеся жидкости, такие как бензин или растворитель.

Хранение прибора

- Храните прибор при комнатной температуре и оберегайте его от загрязнений, резкого перепада температур, повышенной влажности, ударов и пыли. Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей.
- Храните прибор вдали от воды во избежание электрического удара. Не допускайте попадания воды на поверхность корпуса.
- Не храните и не переносите ингалятор, содержащий жидкие препараты или воду.
- Если прибор не будет использоваться в течение длительного времени, удалите элементы питания для предотвращения возможного протекания электролита.
- Рекомендуется хранить и переносить ингалятор с присоединенной емкостью для лекарства и надетой крышкой емкости для лекарства*.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.



* Для установки крышки емкости для лекарства совместите отверстия на крышке с выступами на емкости для лекарства.